


# Manuel de démarrage rapide du Quantum Blue® Reader 3<sup>ème</sup> génération - Mode Fail Safe



Allumer le Quantum Blue® Reader et suivre les instructions à l'écran.

Si demandé, saisir l'ID utilisateur et le mot de passe.

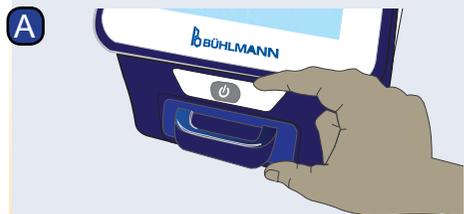

Pour démarrer une nouvelle mesure, appuyer sur « DÉMARRER NOUVEAU TEST ».



Ouvrir le tiroir et placer la carte à code-barres dans le support comme indiqué.



Fermer le tiroir et démarrer le processus de lecture en appuyant sur « Lire ». La méthode de test correspondante est désormais chargée sur le lecteur.



Retirer la carte à code-barres et appuyer sur « Continuer ».



Certaines méthodes de test peuvent nécessiter la sélection du type de prélèvement et/ou de la dilution de l'échantillon.

Si demandé, choisir le type de prélèvement et/ou la dilution de l'échantillon dans le sous-menu en option.



Une fenêtre de résumé s'affiche à l'écran ; elle contient tous les paramètres spécifiques au test.

Si le résumé et les réglages spécifiques au test sont corrects, appuyer sur « Continuer ». Dans le cas contraire, revenir (⏪) à l'étape C, pour modifier les paramètres du test.



Saisir l'ID patient/échantillon au clavier ou via un lecteur de code-barres externe\*.

Trois (3) caractères minimum doivent être saisis. Appuyer sur « Continuer » pour passer à l'écran de mesure.



Déballer la cassette test. Déposer l'échantillon dans l'orifice de chargement de l'échantillon de la cassette test.

Remarque : Pour connaître les volumes de chargement de l'échantillon, consulter les instructions d'utilisation du dosage correspondant.




Ouvrir le tiroir et placer la cassette test dans le support comme indiqué, ...


\*Consulter le Manuel du Quantum Blue® Reader, chapitre « Installation du matériel/ Accessoires », pour plus de détails



... fermer le tiroir et poursuivre immédiatement en appuyant sur « Démarrer la mesure ».

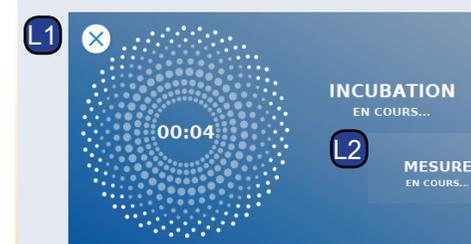

Le lecteur exécute à présent le test, en commençant par l'incubation spécifique au test (L1), suivie de la mesure de la cassette test (L2).

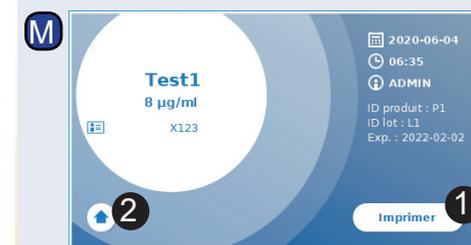

Le résultat s'affiche sur l'écran de résumé des résultats. Les résultats peuvent être imprimés (M, 1) ou une nouvelle mesure peut être démarrée en quittant l'écran d'accueil (M, 2).

Remarque : Les résultats sont enregistrés automatiquement. L'impression est possible uniquement lorsqu'une imprimante dédiée est connectée via USB\*.

Appuyer sur le bouton ON/OFF pendant 2 secondes pour éteindre le Quantum Blue® Reader.



BÜHLMANN Laboratories AG  
Baselstrasse 55  
4124 Schönenbuch  
Suisse  
Téléphone +41 61 487 12 12  
Fax +41 61 487 12 99  
info@buhlmannlabs.ch  
www.buhlmannlabs.ch