



Manuel de démarrage rapide du Quantum Blue® Reader 3^{ème} génération - Mode Fail Safe

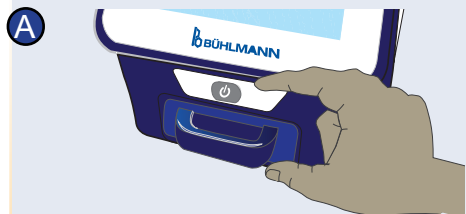


Allumer le Quantum Blue® Reader et suivre les instructions à l'écran.

Si demandé, saisir l'ID utilisateur et le mot de passe.

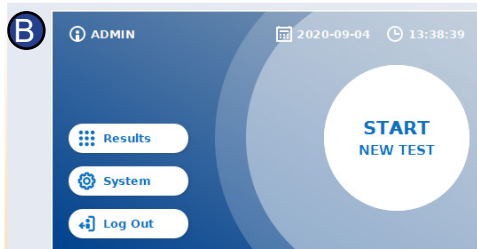

Pour démarrer une nouvelle mesure, appuyer sur « DÉMARRER NOUVEAU TEST (START NEW TEST) ».

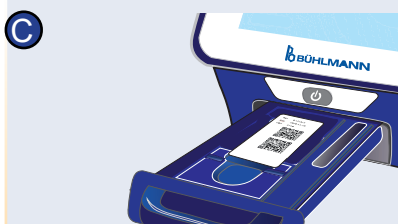


Ouvrir le tiroir et placer la carte à code-barres dans le support comme indiqué.



Fermer le tiroir et démarrer le processus de lecture en appuyant sur « Lire (Read Barcode) ». La méthode de test correspondante est désormais chargée sur le lecteur.




Retirer la carte à code-barres et appuyer sur « Continuer (Continue) ».

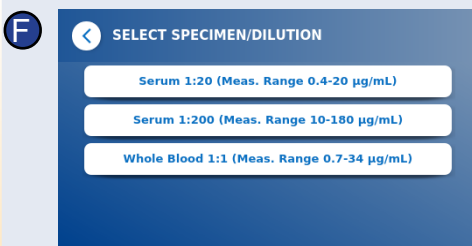

Certaines méthodes de test peuvent nécessiter la sélection du type de prélèvement et/ou de la dilution de l'échantillon.

Si demandé, choisir le type de prélèvement et/ou la dilution de l'échantillon dans le sous-menu en option.

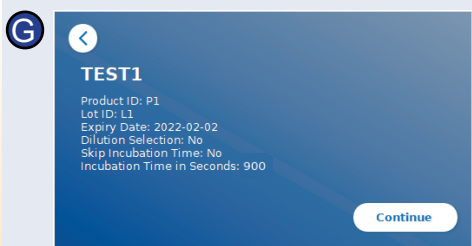


Une fenêtre de résumé s'affiche à l'écran ; elle contient tous les paramètres spécifiques au test.

Si le résumé et les réglages spécifiques au test sont corrects, appuyer sur « Continuer (Continue) ». Dans le cas contraire, revenir (⏪) à l'étape C, pour modifier les paramètres du test.




Saisir l'ID patient/échantillon à l'aide du clavier de l'écran tactile, d'un clavier externe ou d'un lecteur de code-barres externe*.

Trois (3) caractères minimum doivent être saisis. Appuyer sur « Continuer (Continue) » pour passer à l'écran de mesure.

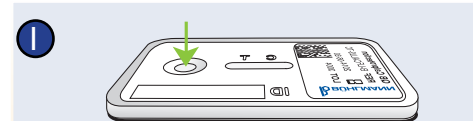

Déballer la cassette test. Déposer l'échantillon dans l'orifice de chargement de l'échantillon de la cassette test.

Remarque : Pour connaître les volumes de chargement de l'échantillon, consulter les instructions d'utilisation du dosage correspondant.

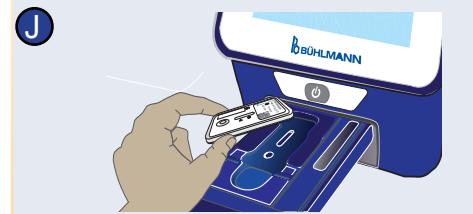

Ouvrir le tiroir et placer la cassette test dans le support comme indiqué, ...

*Consulter le Manuel du Quantum Blue® Reader, chapitre « Installation du matériel/Accessoires », pour plus de détails


Clause de non-responsabilité : Les captures d'écran figurant dans ce mode d'emploi sont uniquement destinées à des fins de démonstration et peuvent varier en fonction de la langue de lecture sélectionnée, de la méthode de test utilisée et du numéro de lot.



... fermer le tiroir et poursuivre immédiatement en appuyant sur « Démarrer la mesure (Start Measurement) ».



Le lecteur exécute à présent le test, en commençant par l'incubation spécifique au test (L1), suivie de la mesure de la cassette test (L2).

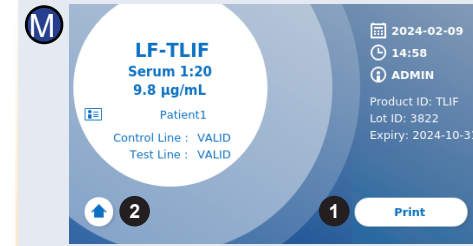

Le résultat s'affiche sur l'écran de résumé des résultats. Les résultats peuvent être imprimés (M, 1) ou une nouvelle mesure peut être démarrée en quittant l'écran d'accueil (M, 2).

Remarque : Les résultats sont enregistrés automatiquement. L'impression est possible uniquement lorsqu'une imprimante dédiée est connectée via USB*.

Appuyer sur le bouton ON/OFF pendant 2 secondes pour éteindre le Quantum Blue® Reader.



BÜHLMANN Laboratories AG
Baselstrasse 55
4124 Schönenbuch
Suisse
Téléphone +41 61 487 12 12
Fax +41 61 487 12 99
info@buhlmannlabs.ch
www.buhlmannlabs.ch