



# Guida rapida - Quantum Blue® Reader 3ª Generazione - Fail Safe Mode

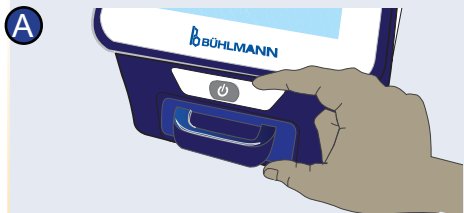


Accendere Quantum Blue® Reader e seguire le istruzioni a schermo.


Se richiesto, immettere l'ID utente e la password.

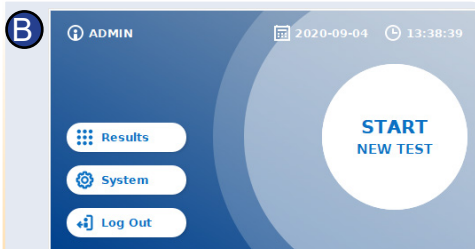

Per avviare una nuova misurazione, premere "AVVIO NUOVO TEST (START NEW TEST)".

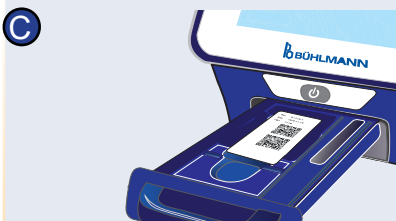


Aprire il cassetto e posizionare la scheda con il barcode nel vano apposito come indicato.

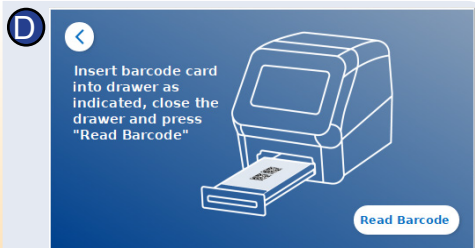

Chiudere il cassetto e avviare il processo di lettura premendo "Leggi barcode (Read Barcode)". Il metodo di analisi appropriato viene ora caricato sul lettore.



Togliere la scheda con il barcode e premere "Continua (Continue)".

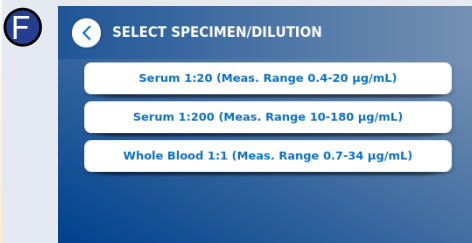

Alcuni metodi di analisi possono richiedere una selezione del tipo di campione e/o della diluizione del campione.

Se richiesto, scegliere il proprio tipo di campione e/o diluizione del campione dal sottomenu opzionale.




Sulla schermata compare una finestra ripiegativa che mostra tutti i parametri specifici per l'analisi.

Se il riepilogo e le impostazioni specifiche per l'analisi sono corretti, premere "Continua (Continue)". In caso contrario, opzionalmente tornare (⏪) alla fase C per cambiare le impostazioni dell'analisi.




Immettere l'ID del paziente/campione tramite la tastiera a schermo, una tastiera esterna o uno scanner di codici a barre esterno\*.

Devono essere immessi almeno 3 caratteri. Premere "Continua (Continue)" per passare alla schermata della misurazione.

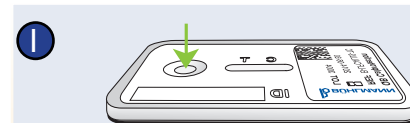

Estrarre dalla confezione la cassetta di rilevazione. Applicare il proprio campione sulla porta di carico del campione nella cassetta.


Nota: per i volumi da applicare, consultare le istruzioni per l'uso del rispettivo dosaggio.

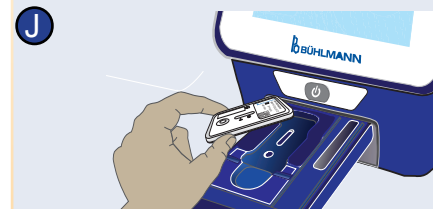


Aprire il cassetto e posizionare la cassetta di rilevazione nel vano apposito come indicato, ...

\*Per informazioni dettagliate, consultare il capitolo "Installazione di hardware/Accessori" del Manuale del Quantum Blue® Reader


Esclusione di responsabilità: Le schermate contenute in queste istruzioni per l'uso sono solo a scopo dimostrativo e possono variare a seconda della lingua del lettore selezionata, del metodo di test utilizzato e del numero di lotto.

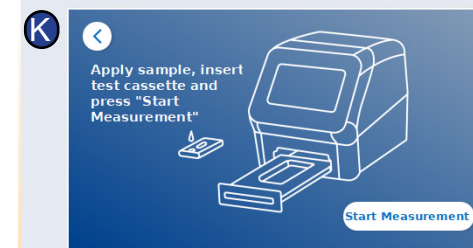

...chiudere il cassetto e proseguire immediatamente premendo "Avvia misurazione (Start Measurement)".

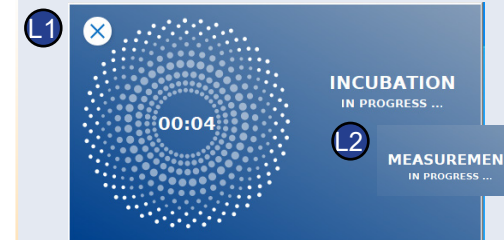

Il lettore ora eseguirà l'analisi, iniziando dall'incubazione specifica per l'analisi (L1), seguita dalla misurazione della cassetta di rilevazione (L2).

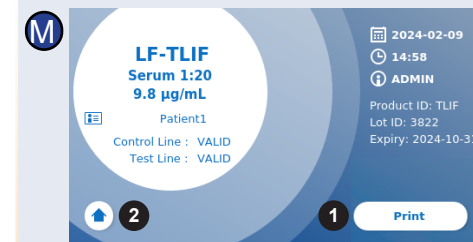

Il risultato è visualizzato sulla schermata di riepilogo dei risultati. È possibile stampare il risultato (M, 1), o passare alla schermata home (M, 2) per avviare una nuova misurazione.

Nota: i risultati vengono salvati automaticamente. La stampa è possibile solo se una stampante dedicata è connessa via USB.\*

Premere il pulsante ON/OFF per 2 secondi per spegnere il Quantum Blue® Reader.



BÜHLMANN Laboratories AG  
Baselstrasse 55  
4124 Schönenbuch  
Svizzera

Tel. +41 61 487 12 12  
Fax +41 61 487 12 99  
info@buhlmannlabs.ch  
www.buhlmannlabs.ch