



# Guia Rápido - Quantum Blue® Reader de 3ª geração - Fail Safe Mode

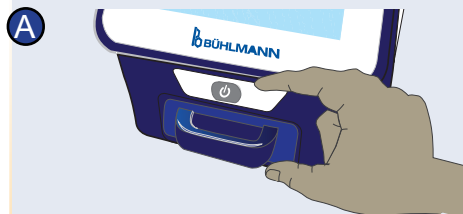

Ligue o Quantum Blue® Reader e siga as instruções mostradas na tela.


Se solicitado, forneça a ID de usuário e senha.

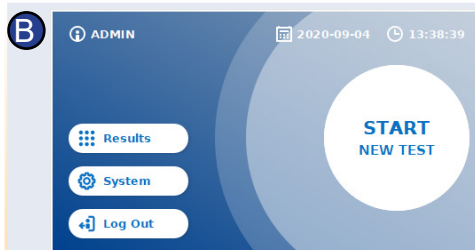

Para iniciar uma nova medição, pressione "INICIAR NOVO TESTE (START NEW TEST)".




Abra a gaveta e coloque o cartão de código de barras no suporte, conforme indicado.

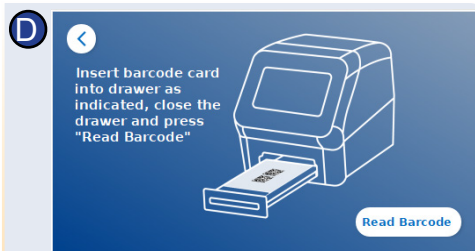

Feche a gaveta e inicie o processo de leitura pressionando "Ler (Read Barcode)". O método de teste apropriado será então carregado no leitor.



Remova o cartão de código de barras e pressione "Continuar (Continue)".

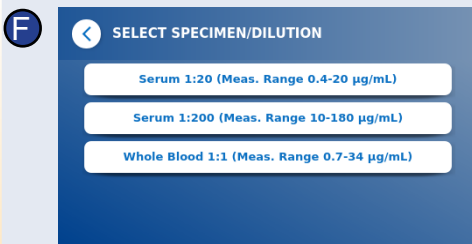

Alguns métodos de teste podem requerer a seleção do tipo de espécime e/ou a diluição da amostra.

Se solicitado, selecione o seu tipo de espécime e/ou a diluição da amostra no submenu de opções.




Uma janela-resumo aparecerá na tela, exibindo todos os parâmetros específicos do teste.

Se o resumo específico do teste e as configurações estiverem corretos, pressione "Continuar (Continue)". Caso contrário, retorne (⏪) à etapa C, se desejar, para alterar as configurações do teste.




Digite a ID do paciente/da amostra usando o teclado na tela, um teclado externo ou um leitor de código de barras externo\*.

Pelo menos 3 caracteres precisam ser inseridos. Pressione "Continuar (Continue)" para acessar a tela de medição.

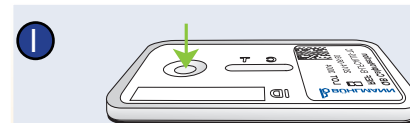

Desembale o cassete do teste. Aplique a amostra no orifício de carga da amostra de cassete do teste.

Nota: Para verificar os volumes de aplicação, consulte as instruções de uso correspondentes do teste.

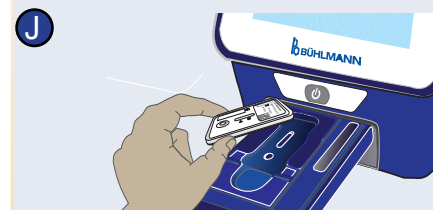


Abra a gaveta e coloque o cassete do teste no suporte de cassete, conforme indicado...

\*consulte o manual do Quantum Blue® Reader, capítulo "Instalação de componentes de hardware / acessórios" para obter informações detalhadas.


Isenção de responsabilidade: As capturas de tela nesta instrução de uso são apenas para fins de demonstração e podem variar dependendo do idioma de leitura selecionado, do método de teste usado e do número do lote.



...feche a gaveta e continue imediatamente, pressionando "Iniciar medição (Start Measurement)".

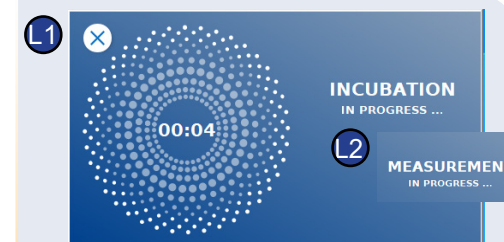

O leitor executará o teste, começando pela incubação específica do método (L1), seguida da medição do cassete do teste (L2).

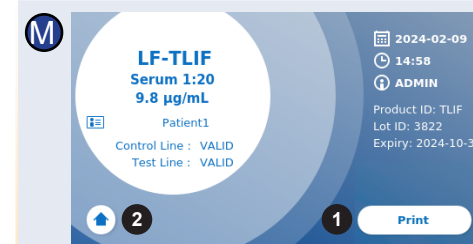

O resultado é mostrado na tela-resumo dos resultados. Você pode imprimir o resultado (M, 1) ou retornar à tela inicial (M, 2) para começar uma nova medição.

Nota: Os resultados são salvos automaticamente. A impressão somente é possível se uma impressora dedicada estiver conectada via USB\*.

Pressione o botão liga/desliga por 2 segundos para desligar o Quantum Blue® Reader.



BÜHLMANN Laboratories AG  
Baselstrasse 55  
4124 Schönenbuch  
Suíça  
Fone +41 61 487 12 12  
Fax +41 61 487 12 99  
info@buhlmannlabs.ch  
www.buhlmannlabs.ch